

取扱説明書

ニューポイントマットレス（ショートタイプ）

PKM-9080F

この度は、ニューポイントマットレス（ショートタイプ）PKM-9080Fをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。

- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

レールの位置が体の中心より高い事をご確認ください。

22cm以上

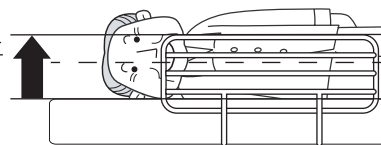

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 通気性、通水性に優れたポリエステルマットレスです。
- 2層構造により2つの寝心地が選べます。
- 芯地・外カバー・内カバーは全て抗菌処理をしており、外カバーはさらに防臭・難燃処理をしています。
- 外カバーと内カバーは取り外しができ洗濯が可能です。

使用方法

- 2層構造により、硬い面/柔らかい面がありますので、好きな寝心地の方をお選びください。
硬い面の芯地に青い線があります。（外カバーと内カバーを開けると確認できます）
- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- 定期的に頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。

お手入れ

●マットレスを清潔にご使用いただくために

- ・定期的に通気や換気をしてください。
- ・定期的に日陰干しを行ってください。
- ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。

※日陰干し⇒掃除機でのマット全面の吸引⇒日陰干しを行っていただくと、より効果的です。

●外力バーと内カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。

●外力バー・内カバーの洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



2分以下の短時間で絞ってください。



塩素漂白剤での漂白はできません。



アイロンは使わないでください。





ドライクリーニングには対応していません。

●中身は2層構造になっていますので、汚れた場合、それぞれをご家庭のシャワーなどで洗浄してください。

水切れの良いポリエステルを採用していますが、日陰で干し乾いた後にカバーに入れてください。

●洗浄、洗濯後にカバーに入れる際は、マットの硬い面にある青い印を目印に入れてください。

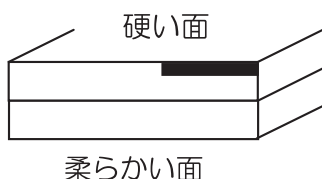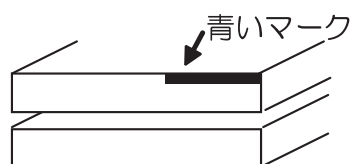

上下を変えることで両面を硬い面、柔らかい面にすることができます。

仕様

商品名	ニューポイントマットレス（ショートタイプ）
型 式	PKM-9080F
寸 法 長さ×幅×厚さ	長さ178.0×幅90.0×厚さ8.0cm
重さ	7.0kg
材料	外力バー・内カバー・芯地：ポリエステル
原産国	韓国